

# МИСС КРУГЛЯШКА ЖЕМЧУЖИНА COZSCORE



## *Функции продукта*

**Нагревание** Обеспечивает нагревание кожи/открывает поры

**Отбеливание** (Даёт лучший результат, когда используется с отбеливающей косметикой)

Активные ингредиенты легко впитываются кожей

**Антивозрастной эффект** (Дает лучший эффект, когда используется с антивозрастной косметикой).  
Улучшает упругость кожи/активные вещества легко впитываются кожей. (Эффективен в восстановлении упругости кожи, улучшает циркуляцию крови под кожей, уменьшает пигментацию и создает антивозрастной эффект.)

**Подтяжка** (Даёт лучшие результаты, когда используется с косметикой для устранения морщин)  
Улучшает кожу/расслабляет кожу лица

## *Комплектация*

-прибор

-инструкция

-кабель MICRO USB

- чехол



- индикатор режима
- ионный терминал
- лампа режима
- кнопка/переключатель режимов
- LED лампа (светодиод)
- нагревание/микровибрация/ ионная головка

## Как использовать

Пожалуйста, убедитесь, что вы зарядили устройство хотя бы в течение одного часа, до того как вы будете использовать его первый раз после покупки (у вас займет 4-5 часов, чтобы зарядить устройство, если оно было разряжено полностью). Для того чтобы зарядить батарею, подсоедините зарядку от смартфона или микро USB кабель, который приложен к прибору, затем подсоедините его к внешнему источнику питания. Рекомендуется использовать зарядное устройство со следующими характеристиками - D.C. 5.2V/500 mAh или большей мощности. Прибор не работает во время зарядки.

### 1.Описание работы индикатора режима во время зарядки

Индикатор режима показывает статус зарядки в то время, как микро USB кабель присоединен к прибору

1) Красный - заряжается

2) Зелёный - полностью заряжен

## **2. Вкл/Выкл**

1) Когда вы нажимаете кнопку, чтобы установить желаемый режим, тогда прибор включится и выбранный режим будет активирован. Если вы будете держать кнопку нажатой в течении 1-2 секунд - прибор выключится.

2) Как только процедуры в выбранном режиме закончены, при выключении прибора прозвучит сигнал и индикатор режима моргнет цветом следующего режима с интервалом в 2 секунды.

3) Если вы подсоедините устройство к зарядке во время выбранного режима работы, прибор остановит свою работу и начнет заряжаться.

## **3. Описание работы индикатора режима и различных подсветок этих режимов**

(Вместе со звуковым сигналом) **Белый**: показывает, что прибор подогревается для режима нагрева.

**БЕЛЫЙ**: режим нагрева

**Зелёный цвет**: обозначает отбеливающий режим

(Вместе со звуковым сигналом) **Красный**: обозначает, что прибор подогревается для включения антивозрастного режима.

**КРАСНЫЙ**: Антивозрастной режим

**Красная и синяя вспышка**: обозначает подтягивающий режим

**4. Если батарея разрядилась** во время использования, вы услышите ряд звуковых сигналов до того как прибор полностью выключится.

**5. Пожалуйста, протрите головку прибора ватным диском и т.д.** После использования индикатор режима и лампа режима мигает цветом следующего режима. Пожалуйста, удерживайте кнопку выключения.

### **\*Предостережения\***

**Не кладите устройство в воду и не пытайтесь промыть его проточной водой. Нажмите кнопку, чтобы выключить прибор после использования и начать зарядку прибора.**

## **Как использовать прибор в различных режимах**


Когда вы нажимаете кнопку, лампа режима двигается против часовой стрелки и выбранный режим будет активирован. Убедитесь, что вы держите палец в ионном терминале, когда вы используете прибор.

### **1.Режим нагревания**

(нагревание + терапия белого цвета)

Когда кнопка нажата, белая LED лампа индикатора режима мигает. Это сопровождается звуковым сигналом. И прибор начинает разогреваться. Время подогрева примерно равно 1 мин. 30сек. Пожалуйста, используйте прибор после того, как он нагрелся.


- 1) После того как вы сняли макияж, очистите лицо средством для очищения, сбалансируйте кожу лица тоником.
- 2) Массажируйте всё лицо разогретым прибором.
- 3) Время работы: примерно 5 минут.

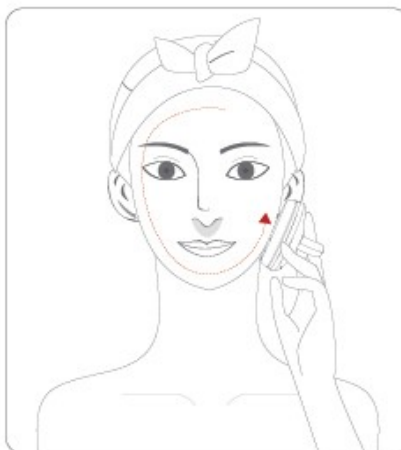

## 2.Отбеливающий режим

(гальваника(электрическое поле) + микровибрация + терапия зелёного цвета)

- 1) Примените соответственное количество осветляющей косметики.
- 2) Массажируйте кожу круговыми движениями.
- 3) Время работы: примерно 5 минут.

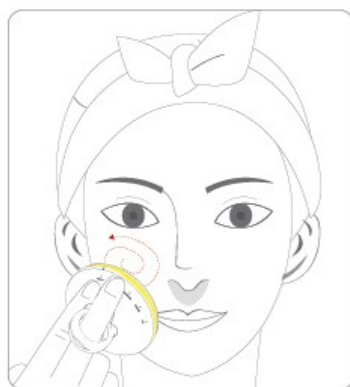

## 3.Антивозрастной режим

(нагревание + гальваника + микровибрация + терапия красного цвета)

Когда кнопка нажата LED лампа индикатора режима мигает и это сопровождается звуковым сигналом и прибор начитает разогреваться. Время разогрева равно примерно 1 мин. 30сек. Пожалуйста, используйте прибор после того, как он нагреется.

- 1) После того, как вы нанесли специальную косметику на вашу кожу (противовозрастная, отбеливающая и UF косметика), массажируйте кожу вдоль линий текстуры кожи.

2) Массажируйте области, подверженные возникновению морщин; такие как – область вокруг глаз, лоб и т.д.

3) Время работы: примерно 5 минут.




#### 4. Режим Лифтинг (подтягивающий)

(гальваника + микровибрация + терапия красного и синего цвета)

1) Нанесите специальную косметику на вашу кожу.

2) Массажируйте лицо легкими движениями от подбородка к вискам. Что касается щек, массажируйте их от внутренней к внешней части. (от рта к ушам)

3) Время работы: примерно 5 минут.

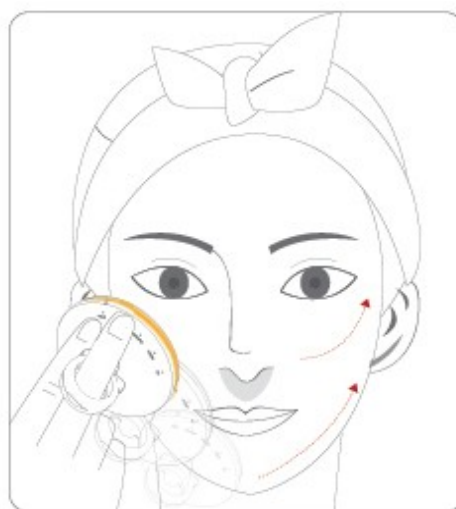

#### Противопоказания к применению прибора.

1. Слишком загорелая кожа

2. Участки с кровотечением

3. Области с кистозными угрями

4. Уши

5. Рот и область гениталий

9. Область дерматита

10. Дети до 12 лет

11. Области с трещинами

12. Беременным женщинам

13. Проконсультируйтесь с врачом в случае если вы подверглись операции на коже или

6. Пациенты с аллергией на металлы

пластической операции, включая процедуру ботокса и т.д.

7. Области с ушибами

8. Пациенты с серьезными сердечными заболеваниями

## **Предостережения к использованию**

1. Не используйте прибор для каких-либо не предусмотренных инструкцией целей.
2. Не применяйте слишком много силы, когда используете прибор. Это может вызвать раздражение кожи.
3. Слишком долгое использование может привести к проблемам кожи (более 5 минут в каждом режиме).
4. В случае нормальной или сухой кожи, используйте прибор 1-2 раза в день по пять минут в каждом режиме (меньше чем 20 минут в целом). В случае жирной кожи используйте прибор 2-3 раза в неделю, по одному разу в каждом режиме (меньше чем 20 минут в целом).
5. Избегайте использование или хранение прибора в местах с высокими температурами, таких как кухня, автомобиль и в местах с повышенным количеством пыли или близко к легко воспламеняющимся объектам - это может вызвать неисправность прибора или уменьшить продолжительность его эксплуатации.
6. Выключите прибор если вы его не используете
7. Если прибор не используется в течении 30 дней или больше, подключайте его к зарядке хотя бы раз в месяц, чтобы избежать не функциональности батареи из-за разрядки.
8. Не мойте прибор химическими средствами.
9. Не замачивайте прибор в воде.
10. Не роняйте прибор и не стучите по нему.
11. Не разбирайте и не пытайтесь починить прибор.  
(вам могут отказать в бесплатной гарантии)
12. Держите подальше от детей.